



R7 CONTINENTAL


**BLYSKAWICZNE DOSTOSOWANIE DZIĘKI SYSTEMOWI QUICKSWITCH CONCEPT
- W JEDNEJ CHWILI PRAWO- LUB LEWOSTRONNY**



R7 INTERNATIONAL (RĘKAWY OD DOŁU)




Staranny dobór materiałów
gwarancją jakości
i optymalnej funkcjonalności

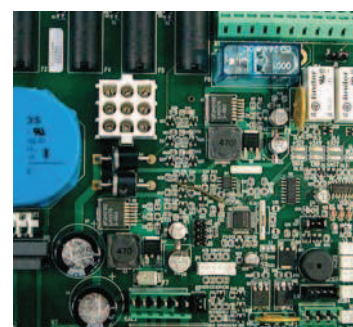

Zastosowanie elektroniki
najnowszej generacji minimalizuje
awaryjność urządzenia

QUICKSWITCH CONCEPT

MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEJ ZMIANY POŁOŻENIA STOLIKA LEKARZA I BLOKU SPLUWACZKI PO PRAWEJ LUB LEWEJ STRONIE FOTEŁA W TRZECH KROKACH

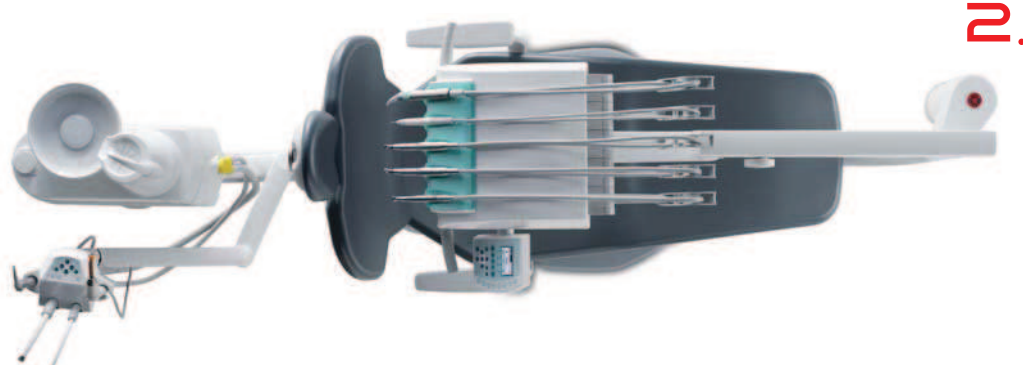

LAMPA OPERACYJNA VENUS PLUS

- płynna regulacja intensywności oświetlenia w zakresie 8000–35000 luksów
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
 - owalny kształt oświetlanego pola
- zdejmowalne uchwyty z możliwością zmiany ustawienia (do góry/do dołu)

PANEL ASYSTY

- na potrójnym ramieniu i miejscu na 4 instrumenty

MISA SPLUWACZKI

- porcelanowa, zdejmowana, obrót o 270°, napęd elektryczny (opcja)

ZAGŁÓWEK

- z blokadą pneumatyczną i pracą w 3 płaszczyznach (opcja)

- dodatkowe sterowanie funkcjami fotela

NAPĘD HYDRAULICZNY

- zmiana położenia
- udźwig – 240 kg

WIELOFUNKCYJNY NACISKOWY STEROWNIK NOŻNY (STANDARD)

(OPCJA)




WÓJ TALENT



obrotowy fotel (+/- 30°)

OBIEG WODY DESTYLOWANEJ

z łatwo dostępnym zbiornikiem

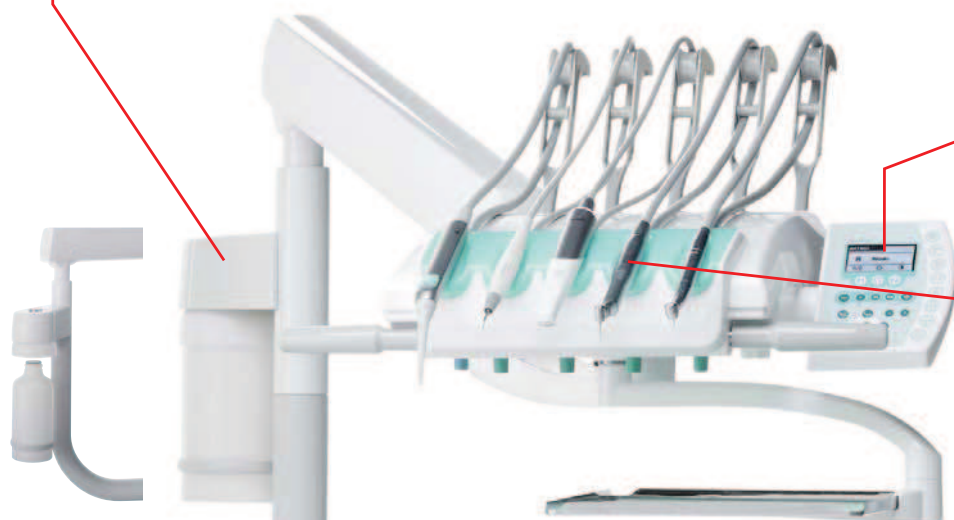

PANEL STEROWANIA

- duży, czytelny wyświetlacz
- bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji

ELEKTRYCZNY MIKROMOTOR CEFLA

- indukcyjny (bezsztukowy), wysoka moc (4 N/cm²)
- funkcja autorewersu i autoforwardu i regulacja momentu obrotowego (opcja)



OBROTOWY FOTEL (+/- 30°)

HYDRAULICZNY FOTEŁA

z siedziska – 38÷82 cm



Ustawienie dla leworęcznego operatora




OBRAZY MÓWIĄ GŁOŚNIEJ NIŻ SŁOWA

Profesjonalna kamera wewnątrzustna CU-2
w standardzie wyposażenia R7 (z oryginalnym uchwytem i monitorem LCD)
Możliwość montażu kamery na stoliku lekarza lub panelu asysty



Unit Anthos R7 pozwala na nieograniczoną liczbę ustawień stolika lekarza i bloku spluwaczki względem pola operacyjnego. Daje to maksymalną swobodę operatorowi i asystce bez względu na dotychczasowe doświadczenia i warunki zabiegu.

dostępne kolory tapicerki:

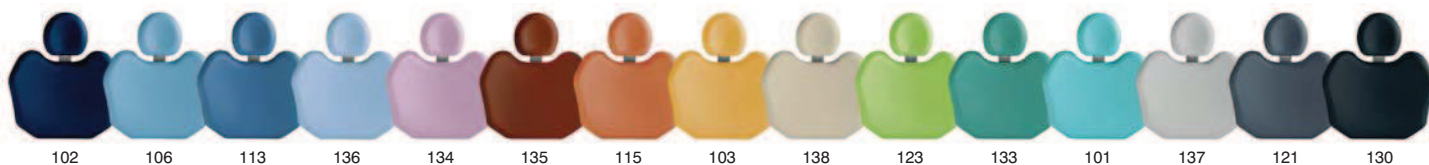

102

106

113

136

134

135

115

103

138

123

133

101

137

121

130

Kompletny system higieny aktywnej i pasywnej gwarantuje bezpieczeństwo.

Elementy unitu mające kontakt z pacjentem lub lekarzem w trakcie zabiegu można zabezpieczyć osłonami jednorazowymi lub łatwo zdemontować do pełnej dezynfekcji.



Na każdym etapie produkcji wszystkie starannie dobrane komponenty unitu Anthos podlegają rygorystycznym testom jakości tak, aby zaoferować stomatologowi doskonałe narzędzie. Cykl produkcji zakończony jest pełną, udokumentowaną, czterogodzinną symulacją pracy.



anatomiczny kształt tapicerki



krzeselko asysty i lekarza



amplituda wysokości siedziska 38-82 cm



Odchylany prawy podłokietnik fotela.



Cienkie oparcie fotela umożliwia lekarzowi optymalny dostęp do pola operacyjnego.



Unit Anthos R7 zaprojektowano tak, aby lekarz i asystent mogli pracować bez żadnych przeszkód. Układ hydrauliczny fotela zapewnia płynną, cichą pracę, delikatne ruszanie i zatrzymywanie.